RJS KLINISCH ADEMLUCHTPAK

CHEMPROTEX™ 300

RESPIREX™

Omschrijving

Het Respirex RJS Powered Respirator Pak is een **vloeistofdicht** pak uit één stuk voor chemische bescherming, ontworpen voor medisch personeel en hulpverleners. Er zijn twee versies beschikbaar: de **klinische versie** bevat medische handschoenen en integrale overschoenen voor gebruik met schoenen die binnen het pak worden gedragen. Een optionele noodontluchter met P3-filter kan op de schouder worden gemonteerd als noodbeveiliging tijdens het transport van de patiënt. De **standaardversie** (zie het verkoopblad) bevat permanent bevestigde handschoenen met chemische barrière en een sokvoet voor gebruik met veiligheidslaarzen die aan de buitenkant van het pak worden gedragen

Het pak is gemaakt van **Chemprotex™ 300**, een hoogwaardige, vijflaagse, niet-geweven chemische barrièrestof die licht van gewicht is met een gesponnen voering voor draagcomfort.



Toepassingen



Gezond-heidsinstan-ties



Militair

Certificering

TYPE 3 | EN 14605:2005+A1:2009
Vloeistofdichte kleding, beschermd tegen chemicaliën

TYPE 4 | EN 14605:2005+A1 2009
Spraydichte kleding, beschermd tegen chemicaliën

TYPE 5 | EN 13982-1:2004+A1:2010
Tegen deeltjes beschermende kleding

TYPE 6 | EN 13034:2005+A1 2009
Beperkte spraydichte kleding, beschermd tegen chemicaliën

EN 12941:1998+A2:2008
Apparaten met ademhalingsbescherming

Verordening (EU) 2016/425
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Materiaalprestaties

FINABEL 0.7.C
Stoffen voor chemische oorlogvoering

EN 14126:2003
Beschermende kleding tegen besmettelijke agentia

EN 1149-1:2006
Antistatische beschermende kleding

Prestatie van aangedreven ademhalingstoestel

Luchtstroom (min):	**160l/min**
Lawaai (in de kap):	**<75db**
Bescherming tegen binnendringen:	**IP64**

(Geschikt voor gebruik in een decontaminatiedouche)

: www.respirex.com : +44 (0)1737 778600

Belangrijke functies

Ademhalingssysteem bestaande uit een op een riem gemonteerde, **op batterijen werkende CleanAIR® chemische 2F** aangedreven ademhalingstoestel


Ritssluiting op de borst met **dubbele stormflap** en klittenbandsluiting - afdichten met tape is niet nodig

Dubbele **CleanAIR® filters** met spatbescherming aan de achterkant (diverse filters verkrijgbaar)

Tien jaar houdbaar, met om de drie jaar een inspectie en test van het pak.

Manchet- en kegelsysteem met druksluiting voor gebruik met medische handschoenen

Integrale overschoen met **antislipzool** en elastische enkel voor gebruik met schoenen die in het pak wordt gedragen.

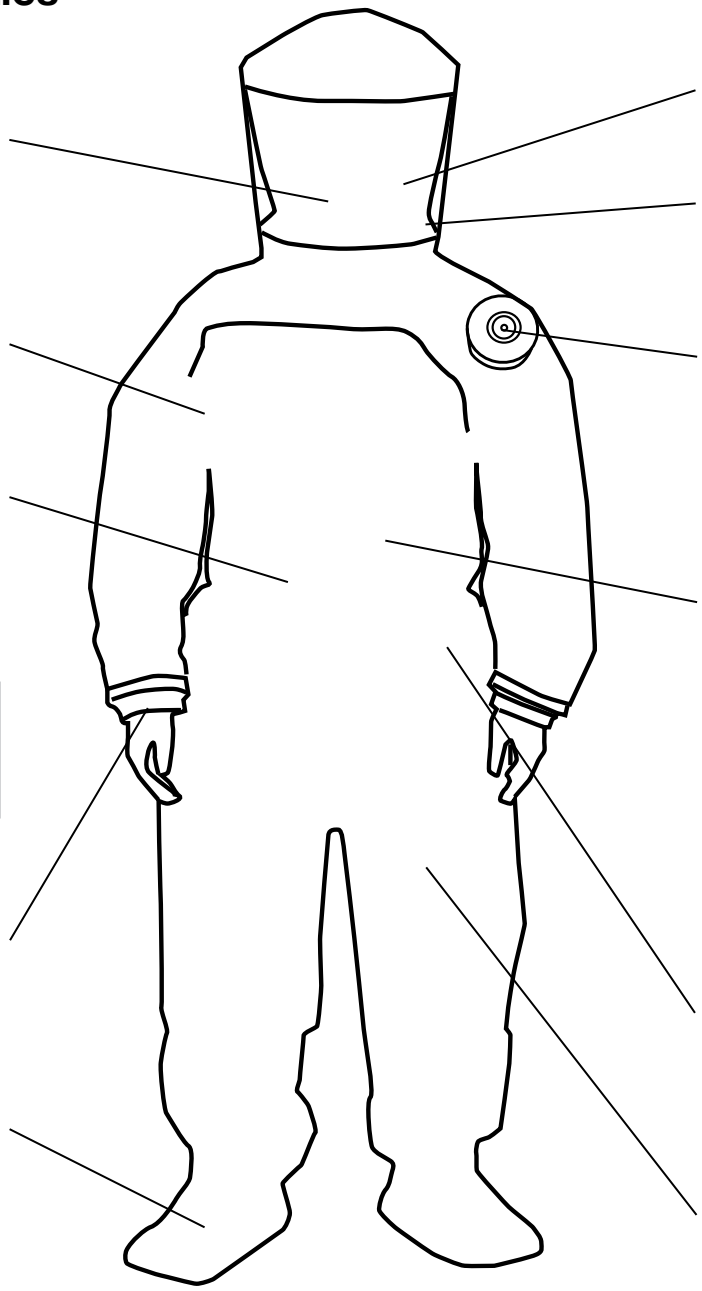


Semi-rigide **gelamineerd vizier** voor een helder, onvervormd zicht

Optioneel Visueel display gemonteerd in het pak onder aan het vizier, met hoorbaar alarm

Optionele noodontluchting op de schouder met P3 filter (moet bij het pak worden besteld).

Een doorzichtig **chemisch beschermvenster** aan de achterkant van het pak dat over het statusdisplay van het CeanAIR® Chemical 2F ademhalingstoestel is geplaatst, maakt het mogelijk de batterijstatus, filterstatus en luchtstroom te bekijken

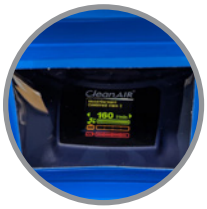

Afstelbare interne **steungordel**

Twee uitademventielen boven de knieën zorgen voor een comfortabele werkdruk in het pak

Aangedreven ademhalingstoestel

Het Chemical 2F elektrische ademhalingsapparaat, binnen het RJS-pak gedragen, met de filters extern gemonteerd, combineert geavanceerde elektronica met een duurzame en eenvoudig te reinigen constructie. De automatisch sluitende inlaten voorkomen dat er verontreiniging in het pak komt terwijl de filters worden vervangen. Het slimme debietcontrolesysteem zorgt voor een constante luchtstroom, ongeacht de belasting van het filter of de acculading.

Oplaadbare of primaire (eenmalig gebruik, houdbaarheid van 10 jaar) batterijen zijn beschikbaar en een extern audio- en visueel alarm aangebracht in de kap van het pak geeft aan wanneer de veilige werktijd is verstreken of wanneer er een probleem is met het ademhalingsapparaat. Verkrijgbaar met een reeks filters, waaronder **P3**, **Chemisch** of **Combinatiefilters** die bescherming bieden tegen chemische en biologische strijdmiddelen.



: www.respirex.com : +44 (0)1737 778600

Voordelen

Kan worden gebruikt door dragers met **gezichtshaar en/of een bril**

Geen vereiste voor **testen voor passen op het gezicht**

De trainingsbehoeften zijn gereduceerd

Elektrisch ademhalingsapparaat biedt **koellucht over het hoofd** en door het pak, waardoor het voor de drager comfortabeler is en hij/zij zich beter kan richten op taken

Een **groot vizier** biedt geruststelling voor patiënten door het onderhouden van non communicatie door middel van gelaatsuitdrukking en helpt bij spraakherkenning door zichtbare lipbewegingen.

Verbeterde operationele duur over gasdichte pakken met SCBA

Tot zes keer de hulpbronefficiëntie vergeleken met gasdichte SCBA-pakken dankzij de lagere fysiologische belasting en langere duur

Aanzienlijk **lichter en comfortabeler**, met gemakkelijker ademen en minder apparatuur in contact met het lichaam dan bij een gasdicht pak met SCBA

Het lagere gewicht en het hogere comfort voor de gebruiker zorgen voor een **lagere fysiologische belasting** dan een conventioneel gasdicht pak

Het aangedreven ademhalingstoestel is afneembaar en herbruikbaar (de filters, externe borgringen en batterijen voor eenmalig gebruik moeten worden vervangen)

Accessoires



Batterijen

4-Uur Oplaadbare batterij (en aparte lader) voor gebruik in trainingstoepassingen

4-Uur eenmalig gebruik Lithiumbatterij voor direct operationeel gebruik met een langere opslagduur



Filters

Er is een serie deeltjesfilters (P3), chemische filters en combinatiefilters verkrijgbaar die passen bij de toepassing van het pak.



Trainingspak

Een trainingsversie van het operationele pak gemaakt van groen PVC en ontworpen voor meervoudig hergebruik.



Rugzak Harnas

Een draagsysteem in rugzakstijl, gedragen in combinatie met de meegeleverde riem die aan het CleanAir® chemicaliën 2F aangedreven ademhalingstoestel kan worden bevestigd voor meer draagcomfort tijdens langdurig gebruik.




Afstandsbeeldweergave

Visueel display dat in het pak aan de basis van het vizier kan worden gemonteerd. De afstandsbeeldweergave bevat een meerkleurige statusindicator-LED en een waarschuwingszoemer.

Matentabel

Maat	Borst (cm)	Hoogte (cm)
Small	88-96	163-175
Medium	96-104	169-182
Large	104-112	176-188
X-Large	112-124	182-194
XX-Large	124-136	188-200

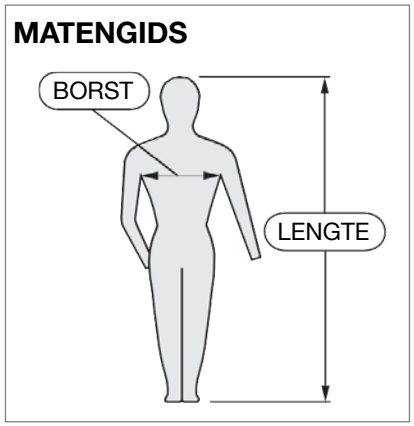

Specificaties

RJS-pak

Pakmaat (max)	TBC
Gewicht pak (max)	TBC
Aantal dozen	TBC
Goederencode	62104000

Specificaties zijn gebaseerd op een pak van maat XL met laarzen, maar zonder optionele accessoires en zijn alleen bedoeld als richtlijn

Materiaaleigenschappen

Prestatievereiste	Testmethode	Eigenschapwaarde van Chemprotex™ 300	Klasse
Slijtageweerstand	EN 530:1994 methode 2	2000 cycli	6
Weerstand tegen beschadiging door buigen (visuele beoordeling)	EN ISO 7854:1997 Methode B	1000 cycli - Geslaagd, 2500 cycli - Niet-geslaagd	1
Weerstand tegen perforatie	EN 863:1995	13.6 Newtons	2
Trapezoïdale doorscheurweerstand	EN ISO 9073-4:1997	Lengte 76,3 Newton, Breedte 53,1 Newton	3
Trekweerstand	EN ISO 13934-1:1999	Lengte 159,1 Newton, Breedte 92,5 Newton	2
Ontstekingsweerstand	EN 13274-4:2001 Methode 3 (test met enkele brander)	Bij verwijdering uit het vuur geen ontsteking of doorgaan van de verbranding	Voldoende
Weerstand tegen blokkering	EN 25978:1993	Lichte blokkering	2
Naadsterkte	EN ISO 13935-2:1999	166.8 Newtons	4
Oppervlakteweerstand	EN 1149-1:2006	Voorkant $<3,6 \times 10^8$ Ω, Achterkant $<3,4 \times 10^7$ Ω	-

: www.respirex.com : +44 (0)1737 778600

Weerstand tegen penetratie door besmettelijke agentia

Het materiaal is geslaagd voor de vereisten van EN14126:2003 voor beschermende kleding tegen besmettelijke agentia. Het is daarom geschikt om bescherming te bieden tegen bloed, pathogenen in het bloed, lichaamsvocht, biologisch verontreinigde aerosolen en doordringen van microben langs zowel natte als droge weg.

Vereiste	Testmethode	Prestatieniveau	EN14126:2003 Klasse
Weerstand tegen doordringen van microben langs natte weg	ISO 22610:2006	> 75 min	6
Weerstand tegen penetratie van bloed en lichaamsvocht met gebruik van synthetisch bloed	ISO 16603:2004	Voldoende	NVT
Weerstand tegen penetratie door pathogenen in het bloed met gebruik van bacteriofage Phi-X174	ISO 16604:2004	20 kPa	6
Weerstand tegen penetratie door biologisch verontreinigende aerosolen	ISO/DIS 22611:2003	Log > 5	3
Weerstand tegen doordringen van microben langs droge weg	ISO 22612:2005	<1 Log cfu	3

Bescherming tegen stoffen voor chemische oorlogsvoering

Stof	Doorbraaktijd (uren)	Temperatuur (°C)
mosterdstof (HD)	>48	37
Sarine (GB)	>48	37
Soman (GD)	>48	37
VX	>48	37

Het Chemprotex™ 300-materiaal is getest op weerstand tegen permeatie door stoffen voor chemische oorlogsvoering overeenkomstig FINABEL O.7.C-methoden bij de gerespecteerde TNO-laboratoria. Men zag dat zowel het materiaal als de naden een uiterst hoge mate van bescherming boden tegen de volgende agentia:

Chemische permeatie & Permasure®



Het RJS-pak is compatibel met de **Permasure**-app voor giftigheidsmodellering, beschikbaar voor Android- en IOS-apparaten. Permasure berekent veilige werktijden voor een database van meer dan 4000 algemene industriële en giftige chemicaliën, waarbij de berekeningen worden gebaseerd op de werkelijke bedrijfsomstandigheden op het moment. Ga voor volledige details naar **www.respirex.com/permasure**

Alle chemische permeatietests worden uitgevoerd onder laboratoriumcondities door onafhankelijke geaccrediteerde laboratoria in overeenstemming met EN 374-3, tenzij anders aangegeven.

Chemische stof Naam	Staat	CAS-nummer	Werkelijk (min.)	ASTM (min.)	EN374-3 (min.)	EN-klasse	SSPR µg/(min.cm²)	MDPR µg/(min.cm²)	Observatie
'Roundup' onkruidverdelger	L	-	>480	>480	>480	6	<0,001	0,001	Geen degradatie
acetaatanhydride	L	108-24-7	>480	>480	>480	6	<0,001	0,001	Geen degradatie
acetaatzuur (30%)	L	64-19-7	>480	>480	>480	6	<0,001	0,001	Geen degradatie
acetaatzuur (ijzig)	L	64-19-7	>480	>480	>480	6	<0,001	0,001	Geen degradatie
acetaldehyde	L	75-07-0	>480	>480	>480	6	<0,05	0,05	Geen degradatie
acetofenon	L	98-86-2	>480	>480	>480	6	<0,05	0,05	Geen degradatie
aceton	L	67-64-1	>480	>480	>480	6	<0,02	0,02	Geen degradatie
acetonitril	L	75-05-8	>480	>480	>480	6	<0,05	0,05	Geen degradatie
acrylamide (50%)	L	79-06-1	>480	>480	>480	6	<0,10	0,10	Geen degradatie
acrylonitril	L	107-13-1	>480	>480	>480	6	<0,05	0,05	Geen degradatie
acrylzuur	L	79-10-7	>480	>480	>480	6	<0,005	0,005	Verkleuring
allylalcohol	L	107-18-6	>480	>480	>480	6	<0,05	0,05	Geen degradatie
ammoniak	G	7664-41-7	32	49	>480	6	0,17	0,005	Geen degradatie
ammoniumhydroxide (35% NH3 in water)	L	1336-21-6	>480	>480	>480	6	<0,001	0,001	Geen degradatie
amylacetaat-n	L	628-63-7	>480	>480	>480	6	<0,02	0,02	Geen degradatie
aniline	L	62-53-3	>480	>480	>480	6	<0,05	0,05	Geen degradatie
benzeen	L	71-43-2	28	35	58	2	3,0	0,05	Geen degradatie
benzine, gelood	L	-	>480	>480	>480	6	<0,10	0,10	Geen degradatie
benzine, ongelood	L	8006-61-9	>480	>480	>480	6	<0,05	0,05	Geen degradatie
benzonitriel	L	100-47-0	>480	>480	>480	6	<0,05	0,05	Geen degradatie
benzoylchloride	L	98-88-4	>480	>480	>480	6	<0,05	0,05	Geen degradatie
benzylalcohol	L	100-51-6	>480	>480	>480	6	<0,05	0,05	Geen degradatie
benzylchloride	L	100-44-7	>480	>480	>480	6	<0,05	0,05	Geen degradatie
broom	L	7726-95-6	imm	7	8	0	hoog	0,001	Verkleuring
butaan	G	106-97-8	>480	>480	>480	6	<0,05	0,05	Geen degradatie
butadiene 1,3	G	106-99-0	>480	>480	>480	6	<0,02	0,02	Geen degradatie
butanol n-	L	71-36-3	>480	>480	>480	6	<0,05	0,05	Geen degradatie
butylaldehyde	L	123-72-8	>480	>480	>480	6	<0,05	0,05	Geen degradatie
butylether n-	L	142-96-1	>480	>480	>480	6	<0,05	0,05	Geen degradatie
chloor	G	7782-50-5	>480	>480	>480	6	<0,001	0,001	Geen degradatie
chloorbenzeen	L	108-90-7	120	145	291	5	1,5 (max)	0,05	Geen degradatie
chloorethanol 2-	L	107-07-3	>480	>480	>480	6	<0,02	0,02	Geen degradatie
chlooroacetaatzuur (68%)	L	79-11-8	>480	>480	>480	6	<0,001	0,001	Geen degradatie
chloroform	L	67-66-3	3	6	9	0	22,5	0,01	Geen degradatie
cresol m-	L	108-39-4	>480	>480	>480	6	<0,05	0,05	Geen degradatie
cyclohexaan	L	110-82-7	>480	>480	>480	6	<0,05	0,05	Geen degradatie
cyclohexanon	L	108-94-1	7	13	>480	6	0,23	0,05	Geen degradatie
di(2-ethylhexyl)fthalaat	L	117-81-7	nt	nt	>480	6	nm	1,0	Geen degradatie
dichloordimethylsilaan	L	75-78-5	>480	>480	>480	6	<0,001	0,001	Lichte blaasvorming
dichloormethaan	L	75-09-2	>480	>480	>480	6	<0,05	0,05	Geen degradatie
dieselbrandstof	L	-	>480	>480	>480	6	<0,10	0,10	Geen degradatie
diethylamine	L	109-89-7	7	8	11	1	2,1	0,05	Lichte zwelling
dimethylacetamide N,N	L	127-19-5	223	>480	>480	6	0,08	0,05	Geen degradatie
dimethylformamide N,N	L	68-12-2	>480	>480	>480	6	<0,01	0,01	Geen degradatie

Chemische stof Naam	Staat	CAS-nummer	Werkelijk (min.)	ASTM (min.)	EN374-3 (min.)	EN-klasse	SSPR µg/(min.cm²)	MDPR µg/(min.cm²)	Observatie
dimethylsulfaat	L	77-78-1	>480	>480	>480	6	<0,02	0,02	Geen degradatie
dimethylsulfide	L	75-18-3	7	12	29	1	2,6	0,05	Geen degradatie
dimethylsulfoxide	L	67-68-5	>480	>480	>480	6	<0,02	0,02	Geen degradatie
dioxaan 1,4-	L	123-91-1	26	>480	>480	6	0,05	0,01	Geen degradatie
epichloorhydrine	L	106-89-8	>480	>480	>480	6	<0,05	0,05	Geen degradatie
ethanol	L	64-17-5	>480	>480	>480	6	<0,02	0,02	Geen degradatie
ethanolamine	L	141-43-5	>480	>480	>480	6	<0,001	0,001	Geen degradatie
ethylacetaat	L	141-78-6	>480	>480	>480	6	<0,01	0,01	Geen degradatie
ethylcellosolveacetaat	L	111-15-9	>480	>480	>480	6	<0,01	0,01	Geen degradatie
ethyleendiamine	L	107-15-3	>480	>480	>480	6	<0,001	0,001	Geen degradatie
ethyleendibromide	L	106-93-4	>480	>480	>480	6	<0,05	0,05	Geen degradatie
ethyleenglycol	L	107-21-1	>480	>480	>480	6	<0,05	0,05	Geen degradatie
ethyleenoxide	G	75-21-8	>480	>480	>480	6	<0,05	0,05	Geen degradatie
fenol (85%)	L	108-95-2	>480	>480	>480	6	<0,05	0,05	Geen degradatie
fluorwaterstofzuur 48%	L	7664-39-3	>480	>480	>480	6	<0,02	0,02	Geen degradatie
fluorwaterstofzuur 73%	L	7664-39-3	30	267	>480	6	0,18	0,01	Geen degradatie
formaldehyde (37%)	L	50-00-0	>480	>480	>480	6	<0,001	0,001	Geen degradatie
fosforoxytrichloride	L	10025-87-3	373	437	440	5	5,7 (max)	0,001	Geen degradatie
fosforzuur (85%)	L	7664-38-2	>480	>480	>480	6	<0,001	0,001	Geen degradatie
furaldehyde 2-	L	98-01-1	7	16	>480	6	0,50	0,02	Geen degradatie
glutaraldehyde (5%)	L	111-30-8	>480	>480	>480	6	<0,10	0,10	Geen degradatie
heptaan	L	142-82-5	>480	>480	>480	6	<0,02	0,02	Geen degradatie
hexaan	L	110-54-3	>480	>480	>480	6	<0,05	0,05	Geen degradatie
hydrazinemonohydraat	L	7803-57-8	>480	>480	>480	6	<0,001	0,001	Geen degradatie
kaliumchromaat (sat. oplossing)	L	7789-00-6	>480	>480	>480	6	<0,05	0,05	Geen degradatie
keroseen	L	8008-20-8	>480	>480	>480	6	<0,05	0,05	Geen degradatie
koolstofdisulfide	L	75-15-0	>480	>480	>480	6	<0,05	0,05	Geen degradatie
kwikchloride (sat. oplossing)	L	7487-94-7	>480	>480	>480	6	<0,001	0,001	Geen degradatie
methacrylzuur	L	79-41-4	>480	>480	>480	6	<0,001	0,001	Geen degradatie
methanol	L	67-56-1	46	57	>480	6	0,54	0,02	Geen degradatie
Methyl -2-pyrrolidon n-	L	872-50-4	6	12	>480	6	0,74	0,05	Geen degradatie
methyl-t-butyl-ether	L	1634-04-4	145	248	>480	6	0,16	0,05	Geen degradatie
methylacrylaat	L	96-33-3	118	231	>480	6	0,15	0,02	Geen degradatie
methylchloride	G	74-87-3	>480	>480	>480	6	<0,05	0,05	Geen degradatie
methyleenbromide	L	74-95-3	28	39	>480	6	0,45	0,05	Geen degradatie
methylethylketon	L	78-93-3	>480	>480	>480	6	<0,05	0,05	Geen degradatie
methylmercaptaan	G	74-93-1	>480	>480	>480	6	<0,001	0,001	Geen degradatie
methylmethacrylaat	L	80-62-6	58	97	>480	6	0,42	0,02	Geen degradatie
methylvinylketon	L	78-94-4	>480	>480	>480	6	<0,05	0,05	Geen degradatie
mierenzuur (96%)	L	64-18-6	>480	>480	>480	6	<0,001	0,001	Verkleuring
natriumcyanide (45%)	L	143-33-9	>480	>480	>480	6	<0,001	0,001	Geen degradatie
natriumhydroxide 40%	L	1310-73-2	>480	>480	>480	6	<0,001	0,001	Geen degradatie
natriumhypochloriet (12% chloor)	L	7681-52-9	>480	>480	>480	6	<0,001	0,001	Geen degradatie
nicotine	L	54-11-5	nt	nt	>480	6	nm	0,10	Geen degradatie
nitrobenzeen	L	98-95-3	>480	>480	>480	6	<0,05	0,05	Geen degradatie
nitromethaan (96%)	L	75-52-5	>480	>480	>480	6	<0,05	0,05	Geen degradatie
oleum (15% vrij SO3)	L	8014-95-7	>480	>480	>480	6	<0,001	0,001	Geen degradatie
perchloorzuur	L	7601-90-3	>480	>480	>480	6	<0,001	0,001	Geen degradatie
propaan-2-ol	L	67-63-0	>480	>480	>480	6	<0,05	0,05	Geen degradatie
propyleenoxide 1,2-	L	75-56-9	75	91	>480	6	0,55 (max)	0,05	Geen degradatie
pyridine	L	110-86-1	19	22	>480	6	0,50 (max)	0,05	Geen degradatie
salpeterzuur (> 90% dampen)	L	7697-37-2	>480	>480	>480	6	<0,01	0,01	Verkleuring
salpeterzuur (70%)	L	7697-37-2	>480	>480	>480	6	<0,001	0,001	Geen degradatie
styreen	L	100-42-5	157	208	>480	6	0,51 (max)	0,05	Geen degradatie
tetrachloorethyleen	L	127-18-4	>480	>480	>480	6	<0,05	0,05	Geen degradatie
tetrahydrofuraan	L	109-99-9	23	27	41	2	4,1	0,05	Geen degradatie

Chemische stof Naam	Staat	CAS-nummer	Werkelijk (min.)	ASTM (min.)	EN374-3 (min.)	EN-klasse	SSPR µg/(min.cm²)	MDPR µg/(min.cm²)	Observatie
tolueen	L	108-88-3	39	79	173	4	2,0	0,04	Geen degradatie
tolueen 2,4-diisocyanaat	L	584-84-9	>480	>480	>480	6	<0,10	0,10	Geen degradatie
toluidine o-	L	95-53-4	>480	>480	>480	6	<0,05	0,05	Geen degradatie
trichloorazijnzuur (80%)	L	650-51-1	>480	>480	>480	6	<0,001	0,001	Geen degradatie
trichloorbenzeen 1,2,4-	L	120-82-1	>480	>480	>480	6	<0,05	0,05	Geen degradatie
trichloorethyleen	L	79-01-6	12	14	21	1	12,1	0,05	Geen degradatie
triethylamine	L	121-44-8	59	71	168	4	1,7	0,05	Geen degradatie
trifluorazijnzuur	L	76-05-1	>480	>480	>480	6	<0,001	0,001	Geen degradatie
vinylacetaat	L	108-05-4	>480	>480	>480	6	<0,05	0,05	Geen degradatie
vliegtuigbrandstof	L	-	>480	>480	>480	6	<0,05	0,05	Geen degradatie
waterstofchloride	G	7647-01-0	>480	>480	>480	6	<0,001	0,001	Geen degradatie
waterstoffluoride (watervrij gas)	G	7664-39-3	132	244	304	5	nm	0,01	Gedegradeerd en verkleurd
waterstoffluoride (watervrije vloeistof)	L	7664-39-3	52	125	228	4	1,5	0,01	Gedegradeerd en verkleurd
waterstofperoxide (30%)	L	7722-84-1	>480	>480	>480	6	<0,001	0,001	Geen degradatie
xyleen (iso-mix)	L	1330-20-7	377	399	>480	6	0,35 (max)	0,05	Geen degradatie
zoutzuur (37%)	L	7647-01-0	>480	>480	>480	6	<0,001	0,001	Geen degradatie
zwaveldioxide	G	7446-09-5	>480	>480	>480	6	<0,001	0,001	Geen degradatie
zwavelzuur 50%	L	7664-93-9	>480	>480	>480	6	<0,001	0,001	Geen degradatie
zwavelzuur 95-98%	L	7664-93-9	>480	>480	>480	6	<0,001	0,001	Geen degradatie

Sleutel:

Staat	L-Vloeistof, G-Gas
CAS-nummer	Chemical Abstracts Service-registratienummer
ASTM (min.)	Genormaliseerde doorbraaktijd bij een snelheid van 0,1 µg per cm² per minuut, in minuten.
EN374-3 (min.)	Genormaliseerde doorbraaktijd bij een snelheid van 1,0 µg per cm² per minuut, in minuten.
EN-klasse	Prestatieclassificatie overeenkomstig EN 14325
SSPR µg/cm²/min	Stationaire permeatiesnelheid in µg per cm² per minuut
MDPR µg/cm²/min	Minimum detecteerbare permeatiesnelheid in µg per cm² per minuut

>	Groter dan
<	Kleiner dan
imm	Direct (< 10 min)
nm	Niet gemeten
nt	Niet getest
max	Maximum permeatiesnelheid (SSPR niet bereikt)

Specificaties, configuraties en kleuren zijn onderworpen aan verandering zonder kennisgeving. PermaSURE® is een gedeponeerd handelsmerk van Industrial Textiles and Plastics Limited. Respirex™, GTL™, Hazmax™, Chemprotex™ en Kemblok™ zijn gedeponeerde handelsmerken van Respirex International Limited.

Productdocumentatie

De conformiteitsverklaring en de gebruikersinstructies kunnen allemaal worden gedownload van de productpagina op de Respirex-website. De links zijn te vinden in het tabblad Downloads.

Er zijn tevens video's over de aantrekprocedure en het gebruik van de Permasure-app.

RESPIREX™

Living + Breathing Personal Protection

Respirex International Limited, Unit F Kingsfield Business Centre, Philanthropic Road, Redhill, Surrey, RH1 4DP, Verenigd Koninkrijk

: www.respirex.com : +44 (0)1737 778600 : info@respirex.co.uk